
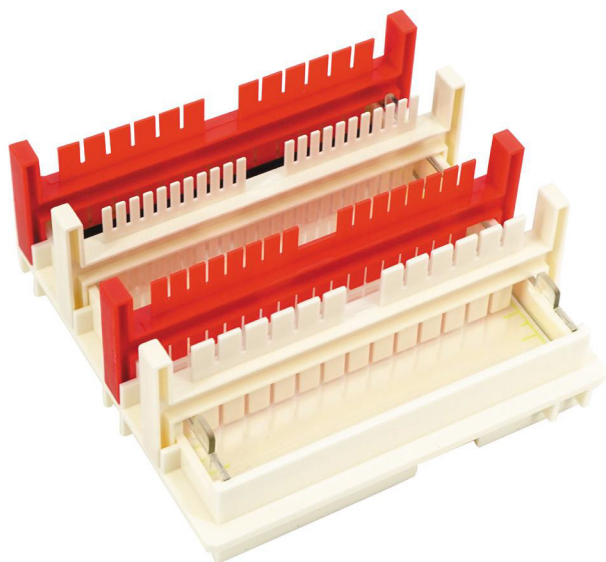


DYCP-31DN型 琼脂糖水平电泳仪 (小号)

• 产品编号：122-3146

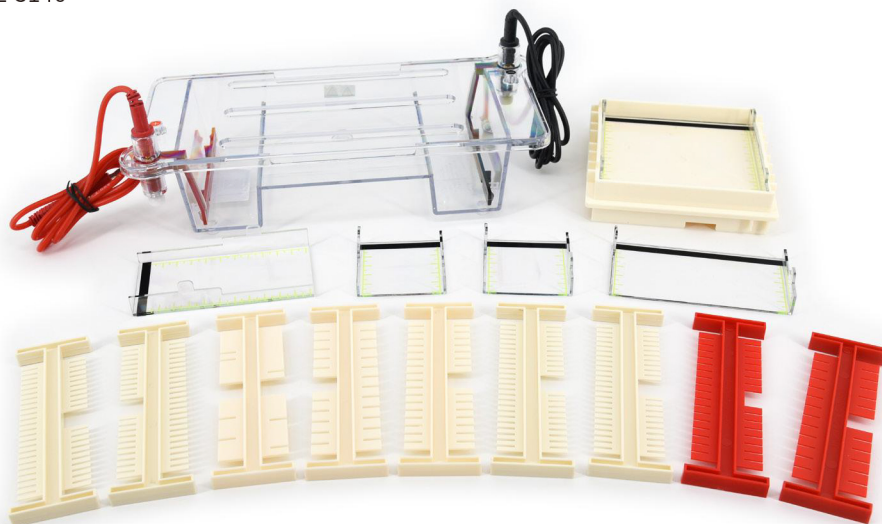

产品规格

外形尺寸(L×W×H): 310×150×120mm

凝胶规格(W×L):

大胶120×120mm; 小胶60×60mm

宽胶120×60mm; 长胶60×120mm

试样格:

2+3 齿(2.0mm厚)

6+13齿, 8+18齿(1.0mm、1.5mm厚)

11+25齿(1.0mm厚)可用排枪加样

重量: 1kg

缓冲液总量: 650mL

配置清单

编号	名称	标配数量
413-1402	电泳仪 (主体)	1 个
413-1403	电泳仪 (上盖)	1 个
144-0011	电泳导线	1 副
143-3146	制胶器	1 个
143-3143	60×60mm 凝胶托盘	2 个
143-3142	60×120mm 凝胶托盘	1 个
143-3141	120×60mm 凝胶托盘	1 个
143-3144	120×120mm 凝胶托盘	1 个
141-3143	1.0mm 25 齿 (11 齿) 试样格	4 把
141-3141	1.5mm 13 齿 (6 齿) 试样格	1 把
141-3145	1.0mm 13 齿 (6 齿) 试样格	1 把
141-3142	1.5mm 18 齿 (8 齿) 试样格	1 把
141-3146	1.0mm 18 齿 (8 齿) 试样格	1 把
141-3144	2.0mm 3 齿 (2 齿) 试样格	1 把

产品用途

适用鉴定、分离、制备 DNA, 及同工酶测定其分子量。

产品特点

- 1.制胶器模具成型, 可以制作四种尺寸不同的胶
- 2.透明上盖开孔式设计, 便于散热, 方便观察
- 3.凝胶托盘带有荧光标尺, 便于观察
- 4.高柔性导线, 开盖断电, 安全性高
- 5.聚碳酸酯注塑成型, 无渗漏
- 6.桥式设计, 节省缓冲液
- 7.耐高温, 不变形
- 8.限位功能, 操作性好
- 9.可拆卸电极架及电极头, 方便彻底清洗和维修