


DYCZ-24DN型 迷你双垂直电泳仪

• 产品编号：121-2446

美国专利：12/439,541 日本专利：3157180
中国专利：2006201384762

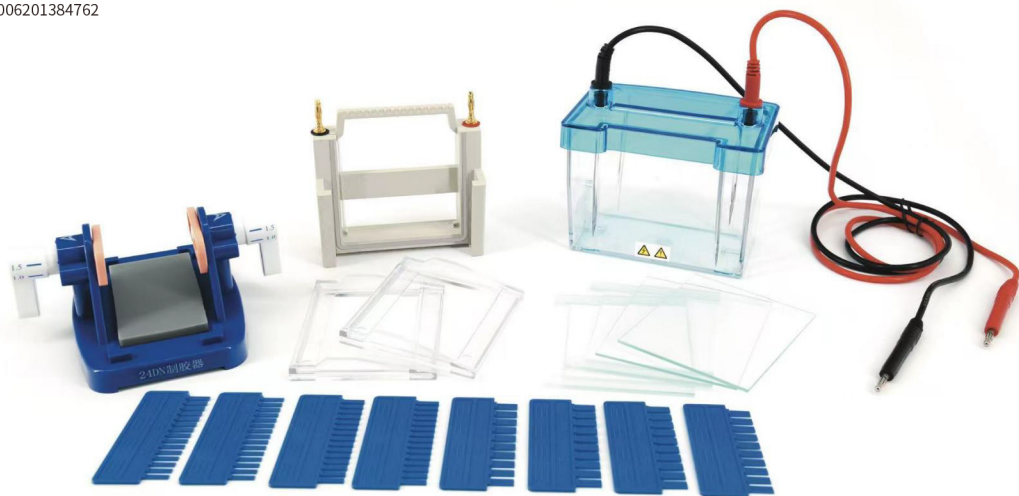

产品用途

用于蛋白凝胶电泳。

产品特点

- 1.高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体，经久耐用，方便观察
- 2.聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能
- 3.无缓冲液渗漏现象
- 4.避免气泡渗入玻璃板之间
- 5.凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡
- 6.结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要
- 7.制胶、电泳一体化设计，使用简单方便
- 8.限位功能，操作准确
- 9.可同时做双板胶，条带清晰
- 10.高柔韧性导线，开盖断电设计，安全性高
- 11.电极头可更换，方便维修

产品规格

外形尺寸(L×W×H)：140×100×150mm
凝胶规格(W×L)：83×75mm
试样格：10、15齿；1.0、1.5mm厚(标配)，
0.75mm(选配)
重 量：1kg
缓冲液总量：400mL

配置清单

编号	名称	标配数量
412-4401	电泳仪（主体）	1个
412-4402	电泳仪（下槽）	1个
412-4403	电泳仪（上盖）	1个
144-0011	电泳导线	1副
412-4406	原位制胶器	1个
143-2444	胶垫	2块
412-4404	斜插板	2个
412-4405	玻璃板（单胶堵板）	1块
141-2443	1.0mm 10齿试样格	2把
141-2444	1.0mm 15齿试样格	2把
141-2445	1.5mm 10齿试样格	2把
141-2246	1.5mm 15齿试样格	2把
141-2441	0.75mm 10齿试样格	2把（选配）
141-2442	0.75mm 15齿试样格	2把（选配）
142-2446A	凹玻璃板（1.5mm边条）	2块
142-2445A	凹玻璃板（1.0mm边条）	2块
142-2444A	凹玻璃板（0.75mm边条）	2块（选配）
142-2443A	平玻璃板	4块