


DYCZ-MINI4型四板垂直电泳仪

• 产品编号：121-2481

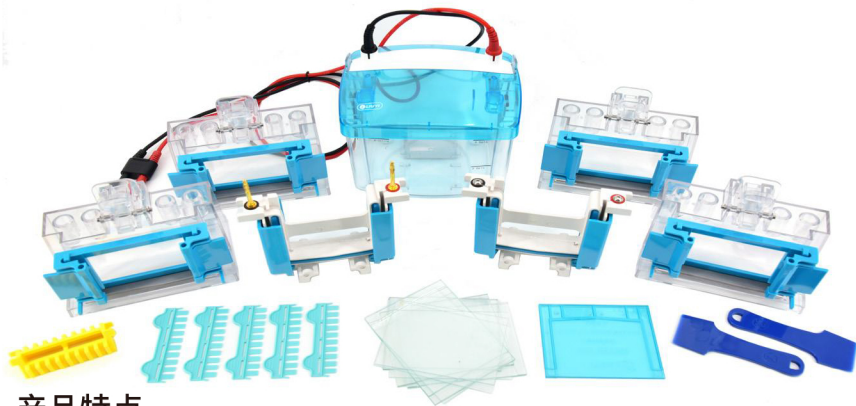

产品特点

- 1.本产品参数、配件与国际主流产品完全兼容；
- 2.选用φ0.3mm、高纯度铂金电极丝，达到较佳的导电性能；
- 3.封边垫条永久地固定在长玻璃板上，有效提升玻板精确对齐，防止漏胶；
- 4.凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板；
- 5.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，有效提升均一的凝胶聚合；
- 6.含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；
- 7.上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。

技术参数

凝胶数：1~4块；
凝胶厚度：标配1.0mm、选配：0.75mm、1.5mm；
加样梳齿数：10齿、选配：15齿；
玻璃尺寸：薄玻璃板（10.1×7.3cm）、厚玻璃板（10.1×8.2cm）；
凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）、预制胶（8.6×6.8cm）。
外形尺寸（L×W×H）：160mm×120mm×180mm
重量：2.0kg

配置清单

编号	名称	数量
412-4811	电泳仪内芯（长螺杆）	1 个
412-4812	电泳仪内芯（圆头螺杆）	1 个
412-4813	电泳仪下槽	1 个
412-4814	电泳仪上盖	1 个
412-4824	单座透明制胶架(含胶垫)	4 套
412-4816	制胶框	4 个
412-4817	挡板（单胶堵板）	1 个
412-4818	胶铲	2 个
142-2483	凝胶玻璃薄板	5 块（1 盒）
142-2480	凝胶玻璃厚板（1.0mm）	5 块（1 盒）
141-2476	试样格 1.0mm10 齿	5 个（1 包）
141-2483	上样托架（10 齿）	1 个

DYCZ-TRANS2型转印电泳仪

• 产品编号：121-4080



配置清单

编号	名称	数量
412-4813	电泳仪下槽	1 个
414-0801	转印槽芯（含转印夹和转移海绵）	1 套
412-4814	电泳仪上盖	1 个
414-0803	蓝冰冰盒	1 个
144-0015	导线	1 付

产品特点

- 1.本产品可快速、高质量地转印小型凝胶，它可容纳2个凝胶支架转印夹，可同时进行两块小型凝胶，也可进行低强度的过夜转印；
- 2.电极丝相距4cm以产生强电场有效提升蛋白转印；
- 3.颜色标记的转印夹和电极确保凝胶的正确定向；
- 4.选用φ0.3mm、高纯度铂金电极丝，达到较佳的导电性能。

技术参数

转印凝胶数：2块；
转印孔板面积：10×7.5cm。
外形尺寸（L×W×H）160mm×120mm×180mm
重量：1.0kg