


DYCZ-MINI 2型双板垂直电泳仪

• 产品编号：121-2482

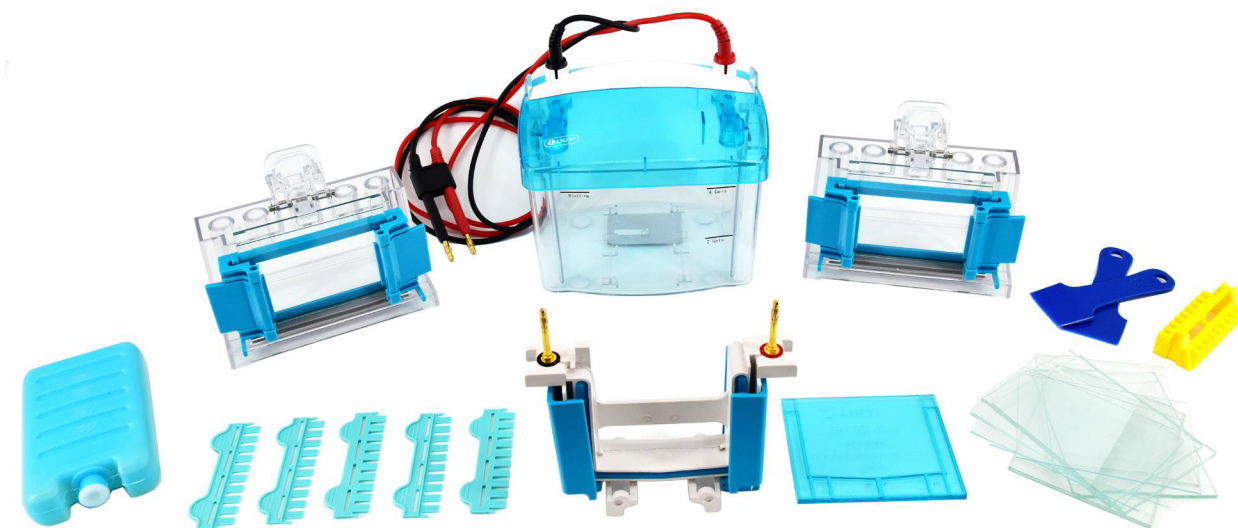

产品特点

- 1.本产品参数、配件与国际主流产品完全兼容；
- 2.选用 $\phi 3\text{mm}$ 、高纯度铂金电极丝，达到较佳的导电性能；
- 3.封边垫条永久地固定在长玻璃板上，有效提升玻板精确对齐，防止漏胶；
- 4.凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板；
- 5.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，有效提升均一的凝胶聚合；
- 6.含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；
- 7.上样引导装置,防止泳道的遗漏上样或重复上样。

技术参数

凝胶数：1~2块；
 凝胶厚度：标配1.0mm、
 选配:0.75mm、1.5mm；
 加样梳齿数：10齿标配、选配:15齿；
 玻璃尺寸：薄玻璃板（10.1×7.3cm）、
 厚玻璃板（10.1×8.2cm）；
 凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）、
 预制胶（8.6×6.8cm）；
 外形尺寸（L×W×H）:160mm×120mm×180mm
 重量：1.0kg

配置清单

编号	名称	数量
412-4811	电泳仪内芯（长螺杆）	1个
412-4813	电泳仪下槽	1个
412-4814	电泳仪上盖（带导线）	1个
412-4824	单座透明制胶架(含胶垫)	2套
412-4816	制胶框	2个
412-4817	挡板（单胶堵板）	1个
412-4818	胶铲	2个
142-2483	凝胶玻璃薄板	5块(1盒)
142-2480	凝胶玻璃厚板（1.0mm）	5块(1盒)
141-2476	试样格 1.0mm10齿	5个(1包)
141-2483	上样托架（10齿）	1个
414-0803	蓝冰冰盒	1个