


DYCP-32C型 琼脂糖水平电泳仪(大号)

- 产品编号：122-3230
- 专利号：201220383094.1

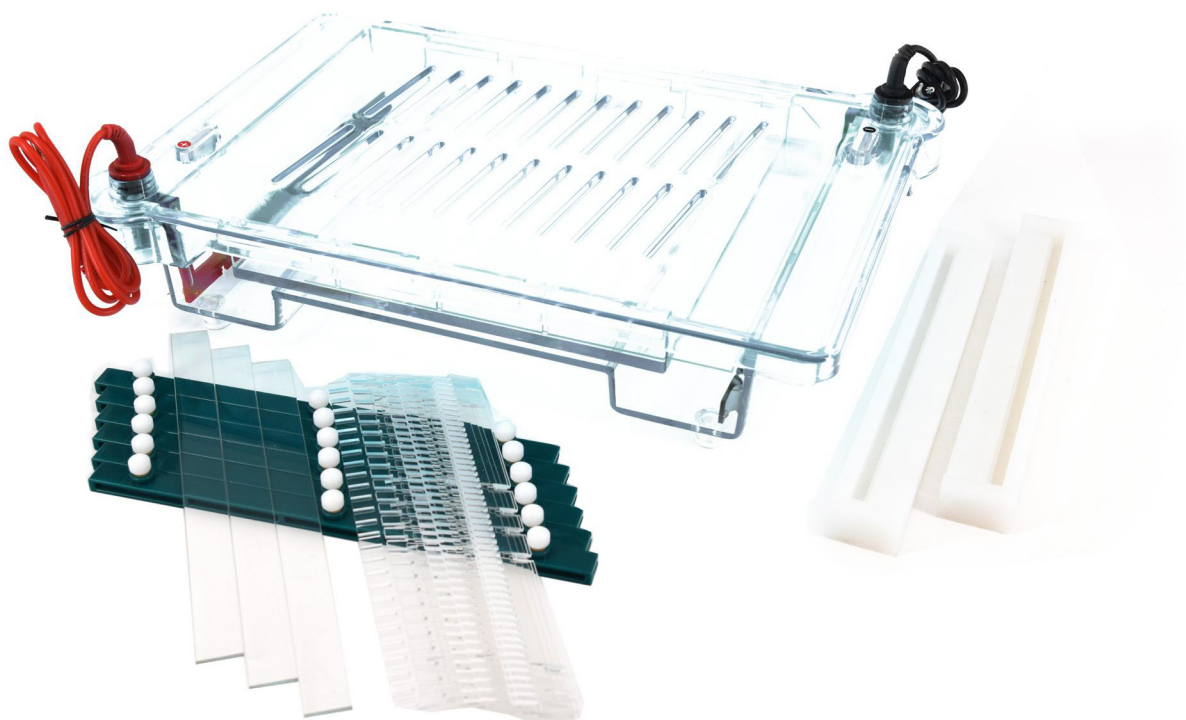

配置清单

产品用途

适用鉴定、分离、制备DNA及同工酶测定其分子量。
本产品可与WD-9418B多用途制胶器配合使用。

产品特点

- 本产品创新设计，胶板规格为大面积尺寸
- 1.采用聚碳酸酯注塑，坚固耐用
 - 2.上盖透明方便观察，有散热孔不易产生雾气
 - 3.方便8道移液器的使用
 - 4.开盖断电，安全性高
 - 5.桥式设计，节省缓冲液
 - 6.高柔韧导线，安全性高
 - 7.可拆卸电极及电极头，方便彻底清洗和维修
 - 8.采用专利技术的密封胶板制胶，方便实用

产品规格

外形尺寸(L×W×H)：420×300×90mm
凝胶规格(W×L)：
250×250mm、250×120mm、250×60mm
试样格：51、42、26齿，1.0mm、2.0mm厚
重量：2.5Kg
缓冲液总量：1600mL

编号	名称	标配数量
413-2300	电泳仪(主体)	1 个
413-2301	电泳仪(上盖)	1 个
144-0011	电泳导线	1 副
143-3231	密封胶板	2 个
143-3230	凝胶托盘	1 个
143-3232	隔板	3 块
141-3231	1.0mm 51齿试样格	2 把
141-3232	2.0mm 51齿试样格	2 把
141-3233	1.0mm 42齿试样格	2 把
141-3234	2.0mm 42齿试样格	2 把
141-3235	1.0mm 26齿试样格	2 把
141-3236	2.0mm 26齿试样格	2 把
142-3230	玻璃板	1 块
试样格支架		6个增配