


DYCP-31E型 琼脂糖水平电泳仪(中号)

• 产品编号：122-3150

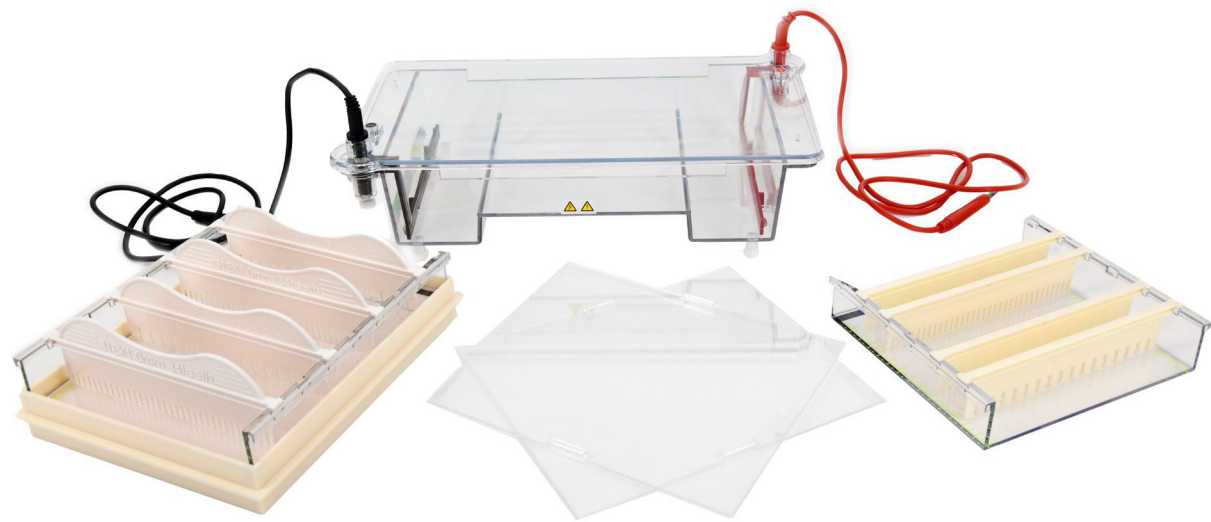

产品用途

适用鉴定、分离、制备DNA，及同工酶测定其分子量。

产品特点

- 1.可充分满足PCR电泳96孔的快速一次完成，并方便8道移液器的使用
- 2.专用制胶器，制胶方便
- 3.透明上盖设计，方便观察
- 4.聚碳酸酯注塑成型，无渗漏
- 5.桥式设计，节省缓冲液
- 6.耐高温，不变形
- 7.限位功能，操作准确
- 8.高柔韧性导线，安全性高
- 9.可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修

产品规格

外形尺寸(L×W×H)：310×195×135mm
凝胶规格(W×L)：160×200mm、160×150mm
试样格：17、34齿，1.0mm、1.5mm厚，可用排枪加样
重量：1.5kg
缓冲液总量：1000mL

配置清单

编号	名称	标配数量
413 - 1500	电泳仪(主体)	1 个
413 - 1501	电泳仪(上盖)	1 个
144 - 0011	电泳导线	1 副
143 - 3153	制胶器	1 个
143 - 3150	大凝胶托盘 200×176mm	1 个
143 - 3151	小凝胶托盘 150×176mm	1 个
143 - 3152	托胶板	2 块
141 - 3151	1.5mm 17 齿试样格	2 把
141 - 3153	1.0mm 17 齿试样格	2 把
141 - 3152	1.5mm 34 齿试样格	2 把
141 - 3154	1.0mm 34 齿试样格	2 把